


# Anchor Fast

Fixador de Tubo Endotraqueal Oral

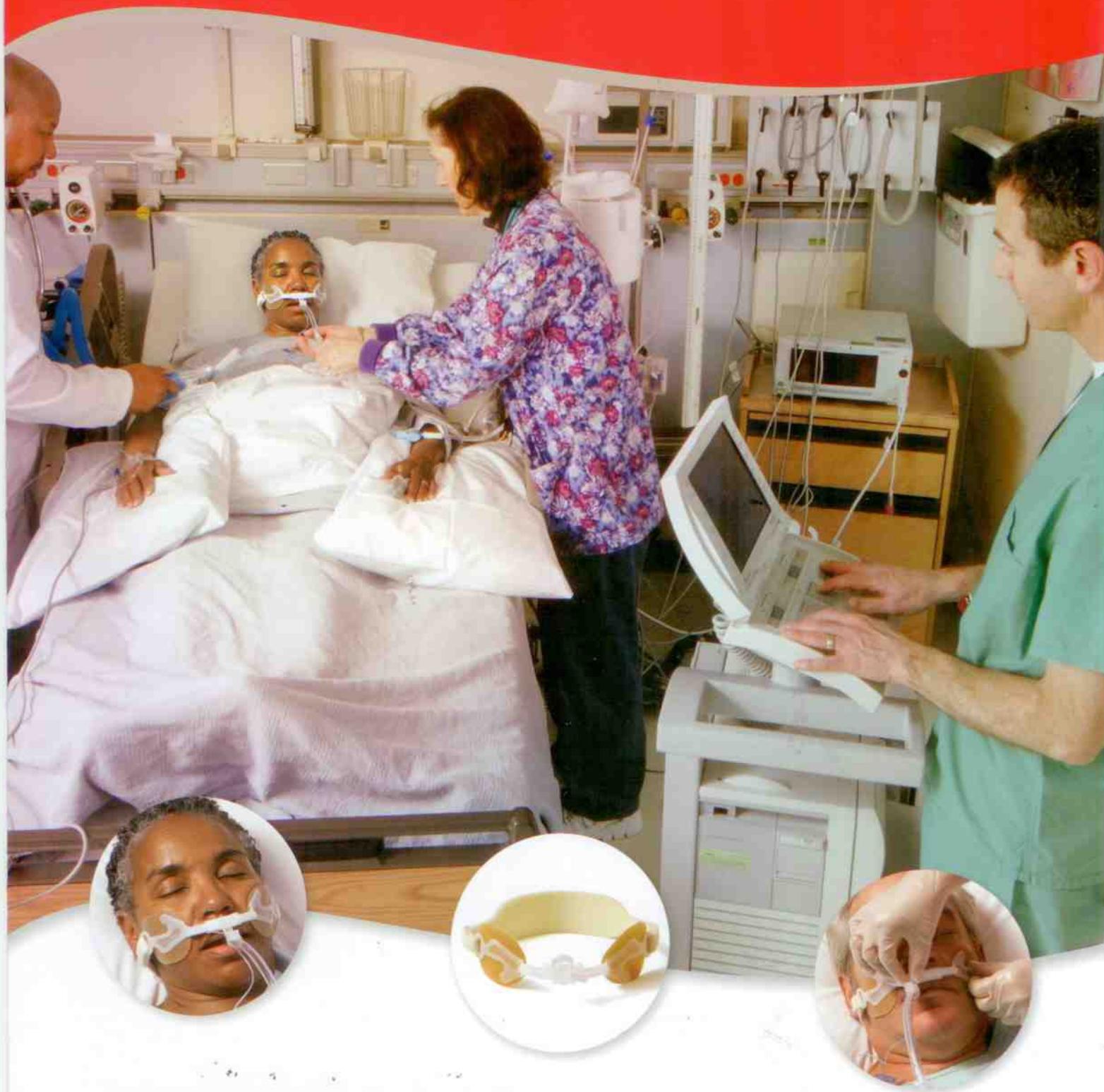

**A proteção para a pele  
do seu paciente de forma  
fácil, segura e inovadora**

 **Hollister**

Atenção aos Detalhes. Cuidado com a Vida.

# Anchor Fast

## Fixador de Tubo Endotraqueal Oral



## A barreira protetora de pele Flextend proporciona mais conforto, maior proteção e mais segurança

**Anchor Fast** é uma alternativa fácil de usar no lugar da fita adesiva. Seu desenho avançado fixa o tubo endotraqueal oral, minimizando o risco de extubação acidental, e permite o movimento do tubo, simplificando o acesso à higienização oral, prevenindo úlceras por pressão.

### Desenho Avançado

Seu desenho avançado ajuda a minimizar a pressão no lábio superior, no tecido circundante, e não obstrui o tubo endotraqueal. A barreira protetora de hidrocoloide **não contém látex**, é suave para a pele e proporciona o uso prolongado do dispositivo, além disso ajuda a conservar a pele saudável, reduzindo sua descamação potencial.

- A moderna barreira protetora de hidrocoloide adere-se à pele, mesmo na presença de secreções orais e transpiração.
- Adere-se de forma segura, eliminando a necessidade do uso de fitas adesivas e suas trocas frequentes.
- A tira ajustável ao pescoço é acolchoada e de fácil fixação.
- Fixa os tubos endotraqueais orais (de 5 a 10 mm de diâmetro).



### Maiores Vantagens

O Fixador Anchor Fast permite o fácil reposicionamento do tubo endotraqueal, sem causar danos através do movimento estável da braçadeira ao longo do trilho, permitindo melhor acesso à aspiração e higiene oral.

- A braçadeira móvel pode ser reposicionada e travada em qualquer ponto do trilho;
- Apenas uma pessoa é necessária para reposicionar o tubo.
- A braçadeira fecha e sustenta o tubo de forma segura.
- Ajuda a minimizar a possível formação de úlceras por pressão nos lábios e tecido mucoso.
- Não deixa resíduos adesivos na pele depois de retirado.



O Fixador **Anchor Fast** possui as características avançadas que os profissionais esperam da Hollister: estabilidade, reposicionamento suave do tubo endotraqueal e proteção da pele, que incrementam o cuidado que você proporciona.

#### Embalado para sua comodidade

- Embalagem individual.
- Conserva o formato.
- Fácil de descartar.

**Não contém  
látex**



\* Em estudo experimental inicial com protótipos, **100%** dos participantes classificaram o **Fixador de Tubo Endotraqueal Oral Anchor Fast** como "fácil" ou "muito fácil"...



\* Hewitt M, Ambutas S. Stable and Secure: Anchor Fast Endotracheal Tube Fastener. Advance for Managers of Respiratory Care 2009;18(3):26.

\*\* População da amostragem de 64 pacientes.

# Dispositivos Hollister de Fixação de Tubos, Drenos e Cateteres

Os Dispositivos de Fixação Hollister ajudam a proteger a pele e proporcionam uma alternativa fácil, no lugar das fitas adesivas, na fixação de tubos, drenos e cateteres.

Cada dispositivo é projetado para:

- proteger a pele de seu paciente com uma barreira de pele suave e, além de aderir firmemente, adapta-se facilmente ao formato da pele e elimina a necessidade de fitas adesivas ou suturas;
- permitir melhor acesso ao cuidado, utilizando mecanismos de segurança ajustáveis, e maior facilidade no posicionamento dos tubos;
- prender os drenos, tubos e cateteres com segurança, ajudando a minimizar a migração ou oclusão dos tubos.



## Anchor Fast – Fixador de Tubo Endotraqueal Oral

<i>Descrição</i>	<i>Código do produto</i>	<i>Quantidade por caixa</i>
	<b>9799</b>	<b>12 unidades</b>

- Simplifica o acesso ao cuidado oral.
- Fixa o tubo endotraqueal (de 5 a 10 mm).
- Barreira de resina sintética *Flexend* adere ao rosto.
- A braçadeira do tubo de encaixe prende o tubo firmemente.
- A tira acolchoada de pescoço é ajustável, fácil e segura de manusear.
- Embalado individualmente.
- Não contém látex.



## FTAD – Fixador de Tubo de Alimentação

<i>Descrição</i>	<i>Código do produto</i>	<i>Quantidade por caixa</i>
	<b>9786</b>	<b>20 unidades</b>

- Fixa tubos nasogástricos e nasointestinais (5 a 18 fr).
- A barreira de resina sintética *Flexwear*, em formato borboleta, adapta-se facilmente ao formato do nariz do paciente.
- A exclusiva braçadeira giratória elimina a pressão nas narinas do paciente.
- Não contém látex.



**Hollister**

Hollister do Brasil  
Rua Arizona, 1.349  
9º andar – cj. 9B  
São Paulo – SP  
Tel.: (11) 5506-6550  
Fax: (11) 5506-4988  
Anvisa nº 10326409027  
nº 10326409028

Conheça o **QualiVida**  
Programa de Atendimento  
ao Estomizado

**0800 778 1000**

Ligação gratuita  
Horário comercial  
qualidade@hollister.com.br