



*Temos o objetivo de ser mais que um fornecedor. Queremos ser parceiros dos profissionais que trabalham em cuidados intensivos na busca por avanços tecnológicos que tragam bem-estar aos pacientes.*

## Colocar os pacientes em primeiro lugar, com confiança.

Introduzimos no mercado o primeiro Fixador de Tubo Orotraqueal (TOT) que facilita o cuidado oral, permitindo o movimento do TOT de um lado ao outro, de forma fácil e segura.

Agora estamos falando de mais uma inovação, um passo além com o Fixador de Tubo Orotraqueal **AnchorFast Guard**, que possui uma proteção integrada.

**AnchorFast Guard**  
Fixador de Tubo Orotraqueal

## Linha de Cuidados Intensivos Hollister

Uma alternativa fácil para fixação de tubos, drenos e catéteres. Com fixação ajustável que permite o acesso ao local que precisa de cuidado.

### AnchorFast Guard - Fixador de Tubo Orotraqueal



- Manga integrada de proteção do tubo para prevenir a oclusão.
- Simplifica cuidado na higiene oral.
- Fixa o tubo orotraqueal (de 5 a 10mm).
- Barreira de resina sintética *Flexend* adere ao rosto.
- A braçadeira do tubo de encaixe prende o tubo firmemente.
- A tira acolchoada de pescoço é ajustável.
- Embalado individualmente.
- Não contém látex.

Código	Descrição	Caixa com
9800	Fixador de tubo orotraqueal com manga de proteção	12 unidades

### AnchorFast - Fixador de Tubo Orotraqueal



- Simplifica acesso para cuidado oral.
- Fixa o tubo orotraqueal (de 5 a 10 mm).
- Barreira de resina sintética *Flexend* adere ao rosto.
- A braçadeira do tubo de encaixe prende o tubo firmemente.
- A tira acolchoada de pescoço é ajustável, fácil e segura de manusear.
- Embalado individualmente.
- Não contém látex.

Código	Descrição	Caixa com
9799	Fixador de tubo orotraqueal	12 unidades

### Tira de Reposição para AnchorFast



- Tira ajustável acolchoada de pescoço.
- Fácil e segura de manusear.

Código	Descrição	Caixa com
9788	Tira de reposição	4 unidades

### HTAD - Fixador Horizontal de Tubo, Dreno ou Cateter



- Fixa tubos, drenos ou cateteres (5 FR – 40 FR) paralelamente à pele do paciente.
- Os tubos podem ser fixados proximais ou distais ao sítio de inserção.
- Auxilia a manter a integridade da pele.
- Estétil.
- Não contém látex.

Código	Caixa com
9781	5 unidades

### VTAD - Fixador Vertical de Tubo, Dreno ou Cateter



- Fixa tubos, drenos ou cateteres (5 FR – 40 FR) verticalmente à pele do paciente.
- Fixa o tubo no sítio de inserção.
- Auxilia a manter a integridade da pele.
- Estétil.
- Não contém látex.

Código	Caixa com
9782	5 unidades

### FTAD - Fixador de Tubo de Alimentação



- Fixa tubos nasogástricos e nasointerais (5 a 18 FR).
- A barreira de resina sintética *Flexwear*, em formato borboleta, adapta-se facilmente ao formato do nariz do paciente.
- A exclusiva braçadeira giratória elimina a pressão nas narinas do paciente.
- Não contém látex.


Código	Descrição	Caixa com
9786	Fixador de tubo de alimentação	20 unidades

Uma Tecnologia Hollister

**AnchorFast Guard**  
Fixador de Tubo Orotraqueal

*Agora com proteção no tubo*

*A Confiança está no ar.*

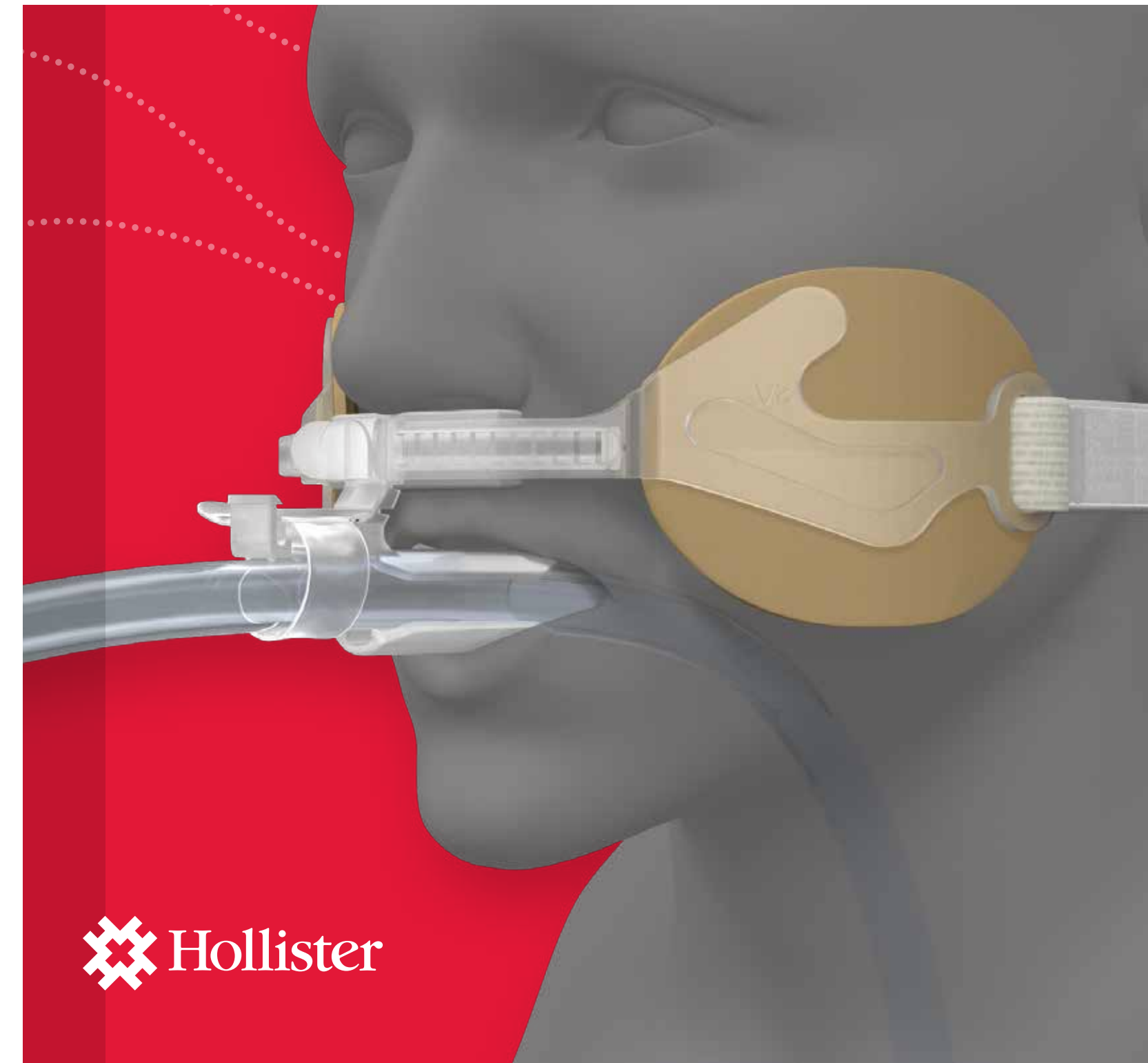

 Hollister

Hollister e logo, AnchorFast, AnchorFast Guard, VTAD, FTAD, HTAD são marcas registradas da Hollister Incorporated.

 Hollister



**AnchorFast Guard** oferece melhores resultados com os pacientes e aumenta a eficiência ao mesmo tempo.

# A Confiança está no ar.

## Minimiza riscos em pacientes entubados.

Riscos associados podem resultar num aumento de Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica (PAVM), aumento no tempo de permanência do paciente na unidade de terapia intensiva e aumento dos custos para o Hospital.

RISCOS para pacientes entubados	BENEFÍCIOS CLÍNICOS do AnchorFast Fixador de Tubo Orotraqueal
<b>SITUAÇÕES ASSOCIADAS A VENTILAÇÃO MECÂNICA</b> , como pneumonia, devido ao acesso limitado para realização da higiene oral.	<b>ACESSO FÁCIL À CAVIDADE ORAL</b> para otimizar sua higienização. Estudos sugerem que uma higiene oral e dentária adequada podem ajudar a evitar a incidência de pneumonia associada à ventilação.
<b>LESÃO POR PRESSÃO ORAL</b> devido a permanência do tubo na mesma posição.	<b>AJUDA A PREVENIR A FORMAÇÃO DE LESÕES NOS LÁBIOS</b> graças ao sistema de deslizamento do tubo.
<b>OCLUSÃO DO TUBO</b> causado pelo próprio paciente em contato direto com o tubo.	<b>AJUDA A PREVENIR A OCLUSÃO DO TUBO</b> por meio da manga integrada de proteção.

Facilita o Cuidado na Higiene Oral

**Sistema de deslizamento do tubo**  
Permite que o tubo seja movimentado de um lado para outro, para o cuidado oral, garantindo que permaneça seguro.

Ajuda a Estabilizar o Tubo Orotraqueal

**O Tubo Orotraqueal permanece seguro por meio da braçadeira que fecha e abre**, de forma fácil para o reposicionamento.

Tamanho real


Ajuda a Manter a Pele Saudável

O **estabilizador não absorvente do lábio superior** foi desenvolvido para manter o tubo afastado, prevenindo o acúmulo de umidade na região.  
As **barreiras de hidrocólide** mantêm o equipamento no lugar e foram desenvolvidos para serem suaves na pele, fáceis de aplicar e resistentes à umidade.


Ajuda a Reduzir a Possibilidade Potencial de Oclusão

**Manga integrada de proteção do tubo**  
Ajuda a prevenir a oclusão sem interferir na rotina de cuidados.  
Uma proteção contra a mordedura do tubo.

**Tira de pescoço ajustável**  
Ajuda a proporcionar uma segurança extra e pode ser trocada.

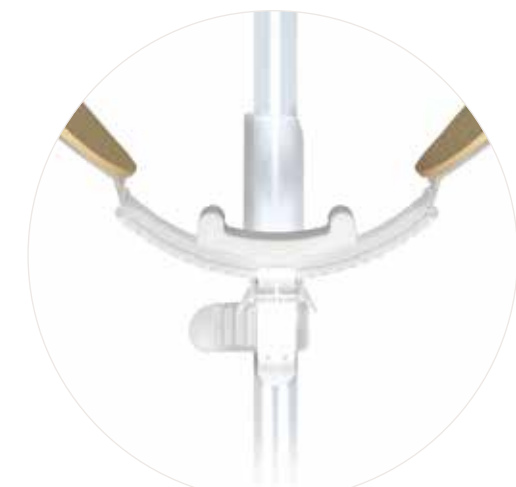

Vista Superior

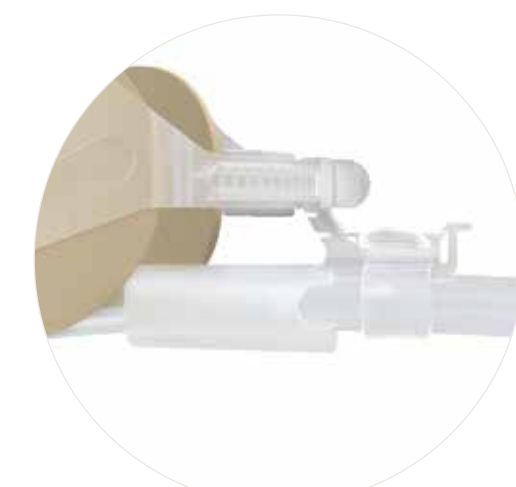

Vista Lateral



Vista Frontal